




Starten met
FreeStyle Libre 3 Plus



Scan met je smartphone om de app te downloaden voordat je begint¹.

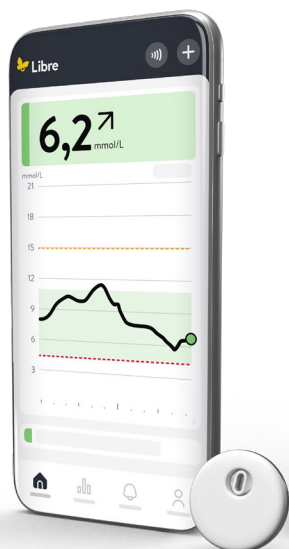

APP STORE



LIBRE APP



GOOGLE PLAY



Zet automatische updates **UIT** en raadpleeg de compatibiliteitsgids **VOORDAT** je een nieuwe versie van het besturingssysteem op je telefoon installeert of de app op een nieuwe telefoon gaat gebruiken.




Zorg ervoor dat je de Nederlandse app selecteert: Libre van Abbott - NL

Inhoud

Ontdek de FreeStyle Libre 3 Plus	4
Aan de slag met FreeStyle Libre 3 Plus.....	6
Begrijp glucosemonitoring met sensor.	10
Gebruik de FreeStyle Libre 3 Plus.....	14
Leven met het FreeStyle Libre-systeem.....	16
Grafieken in de app.....	18
De optionele glucosealarmen activeren	20
De Libre-app voor Apple watch	22
De LibreLinkUp-app.....	24
Het LibreView-platform	26
Connectiviteit.....	28
Ondersteuning	30


Ontdek het FreeStyle Libre 3 Plus-systeem

Een eenvoudig en praktisch continu glucosemonitorsysteem.

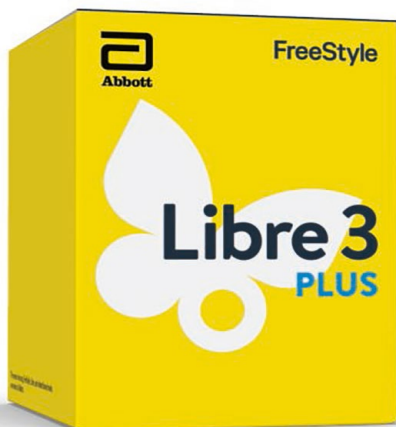

De FreeStyle Libre 3 Plus-sensor & -applicator

- **Meet elke minuut automatisch je glucosespiegel**, dag en nacht.
- Ontworpen om maximaal **15 dagen** op de achterkant van je bovenarm te dragen.
- **Vereist geen vingerpriktest.**^{2,3}
- Een alles-in-één **applicator**.
- Vanaf **2 jaar**.

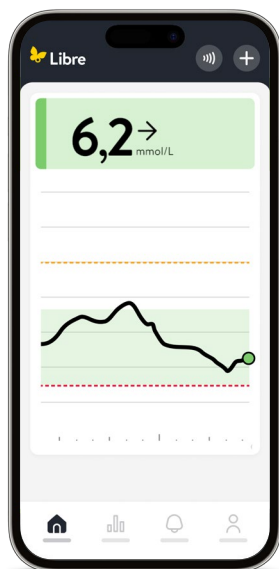

Libre van Abbott - NL¹

- **Je glucosewaarde in één oogopslag, zonder te scannen.**
- **Voeg opmerkingen toe:** inname van koolhydraten, toediening van insuline, lichaamsbeweging, geneesmiddelen...
- **Deel je glucosegegevens eenvoudig** met je familie en/of zorgteam.



De Libre app voor Apple Watch⁴

De Libre-app voor Apple watch⁴ is nu beschikbaar.

Nu kun je met één handbeweging je glucosewaarden, trends en meldingen zien — zonder op je telefoon te kijken.

Alarmen, ook zonder storen

Met één tik schakel je alarmen uit op zowel je horloge^{5,6} als op je telefoon,¹ zodat je ongestoord en gefocust kunt blijven.

Aan de slag met FreeStyle Libre 3 Plus

1 Bereid je huid voor



REINIGEN

Gebruik alleen een niet-hydraterende, parfumvrije zeep om de aanbrengplaats van de sensor te wassen en dep het vervolgens droog.



ONTVETTEN

Gebruik een watje met alcohol om olieachtige resten te verwijderen.



DROGEN

Laat je huid volledig drogen voordat je de sensor aanbrengt. Dit is vooral belangrijk als je van plan bent de sensor aan te brengen na een douche of zwemmen.⁷



Zorg voor een goedgekeurde aanbrengplaats van de sensor op de achterkant van je bovenarm.



Advies voor alle huidtypes



Haar kan de aanhechting van de sensor verstoren.

Scheer het aanbrengplaats van de sensor indien nodig voordat je de sensor aanbrengt.



Vermijd hydraterende producten, crèmes en lotions op het gebied van de sensor. Ze kunnen een **olieachtig residu** achterlaten. **Reinig, ontvet en droog** het gebied voordat je de sensor aanbrengt.

2 Breng de sensor aan



Open de applicator

Schroef de dop van de applicator, leg de dop opzij en plaats de applicator op de vooraf voorbereide zone.



Schroef de dop van de applicator van de sensor NIET terug nadat je hem hebt losgeschroefd, om welke reden dan ook. Dit kan de sensor beschadigen.




Breng de sensor aan

Breng de sensor aan op de achterkant van de bovenarm en druk stevig aan. Je hoort een klik. Verwijder de applicator voorzichtig. Zorg ervoor dat de sensor op de huid blijft kleven. Strijk de randen plat om een optimale hechting te verzekeren.⁸




Aan de slag met FreeStyle Libre 3 Plus

3 Activeer de sensor

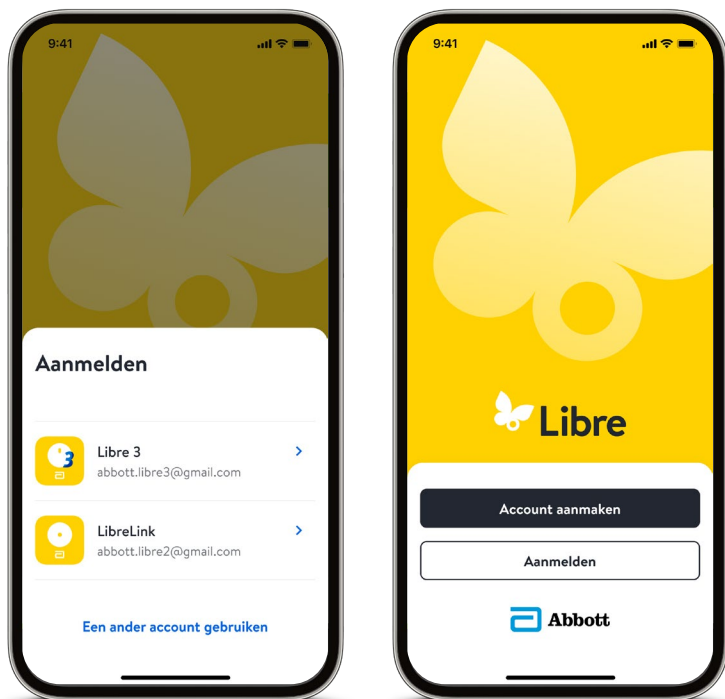

- 1 De Libre app herkent je gebruikersnaam en wachtwoord als je op dezelfde telefoon de Libre 3 app met account hebt staan.

We raden aan om je bestaande account te gebruiken. Als je je wachtwoord niet meer weet kun je dat resetten. Alleen als dat ook niet lukt, dan adviseren we je om een nieuw account aan te maken.

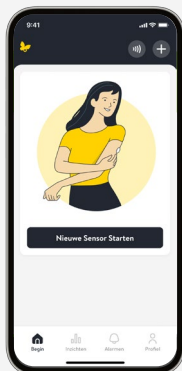2

3

Gebruik de scanfunctie van je smartphone om je sensor te scannen.



Voor smartphones met iOS:


Scan de sensor met het **BOVENSTE DEEL** van je smartphone.



Voor smartphones met Android:

Scan de sensor met de **ACHTER-KANT** van je smartphone. Je moet misschien **NFC⁸** activeren in de instellingen van je smartphone.

Houd je smartphone op minder dan 4 cm van de sensor. Als geluiden en/of trillingen ingeschakeld zijn, zal de smartphone piepen en/of trillen wanneer de sensor is gedetecteerd.

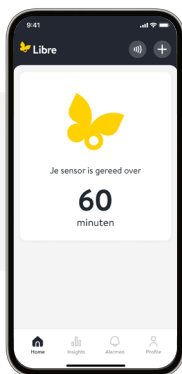4


De sensor kan na 60 minuten gebruikt worden om je glucosewaarde te controleren. **Je ziet een aftelklok verschijnen.**





Elk smartphonemodel is anders. Verplaats je smartphone indien nodig langzaam om de locatie van de NFC ontvanger te bepalen.



Denk eraan een nieuwe sensor te activeren voordat je gaat slapen. Je lichaam kan dan aan de sensor wennen terwijl je slaapt.

Begrijp glucosemonitoring met sensor

Het verschil tussen vingerprikken en Libre sensortechnologie.

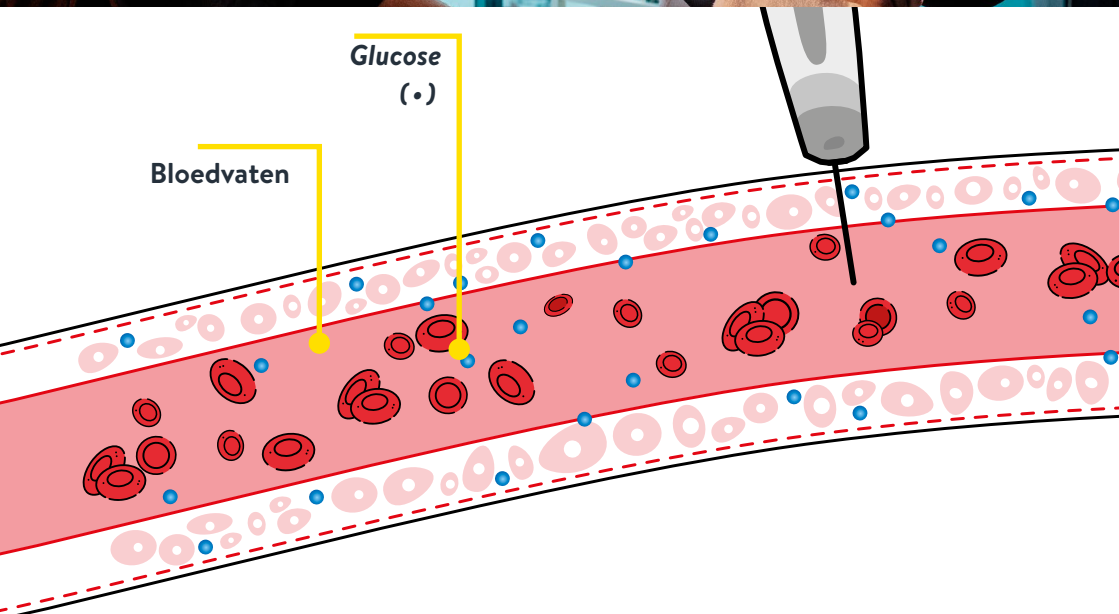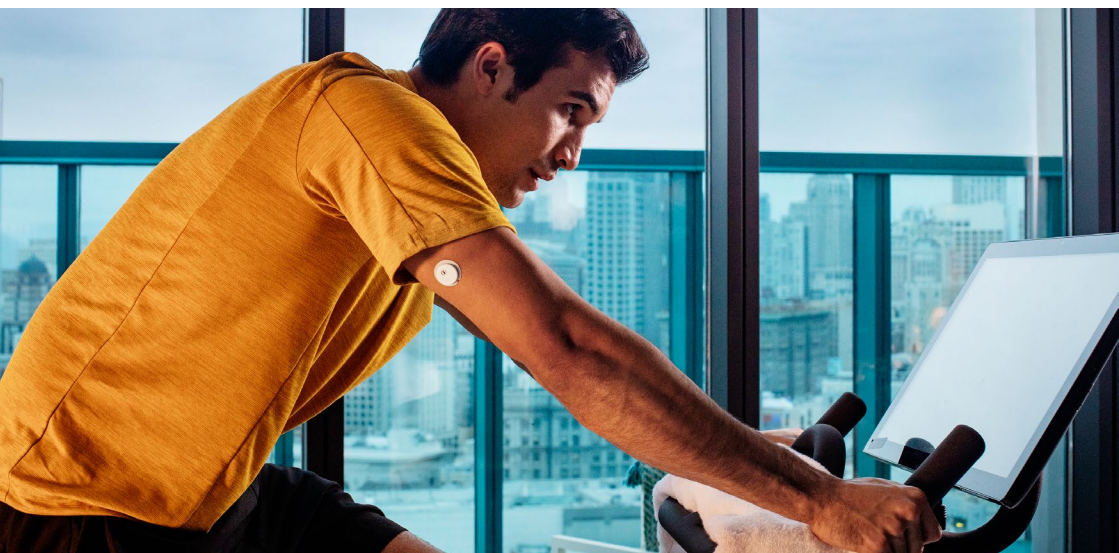

Het is heel normaal dat je glucosespiegel in bepaalde situaties verschilt, want de suiker doet er iets langer over om in de interstitiële vloeistof te dringen dan in het bloed. De glucose komt eerst in de bloedbaan voordat het door de interstitiële vloeistof wordt geabsorbeerd.




Vingerprikken

De klassieke glucosetests verstrekken informatie over je bloedglucosespiegel.



Libre systemen


Libre systemen meten het glucosegehalte in de interstitiële vloeistof (de vloeistof die zich tussen de onderhuidse cellen bevindt) en niet in het bloed. Er is vaak een verschil tussen deze twee gegevens.

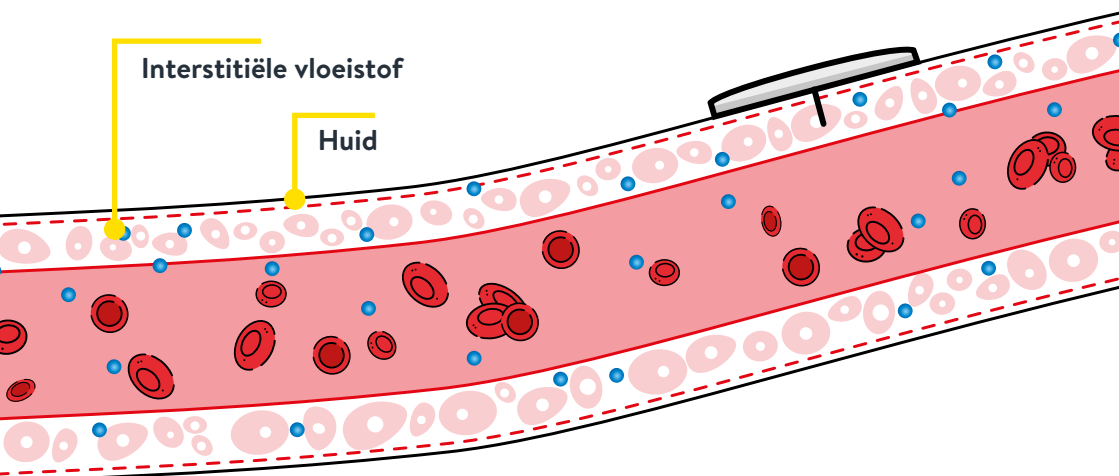

Een vingerprik is nodig indien de metingen van de glucosewaarden niet overeenstemmen met de symptomen of verwachtingen.

Begrijp glucosemonitoring met sensor

Het verschil tussen vingerprikken en Libre sensortechnologie.

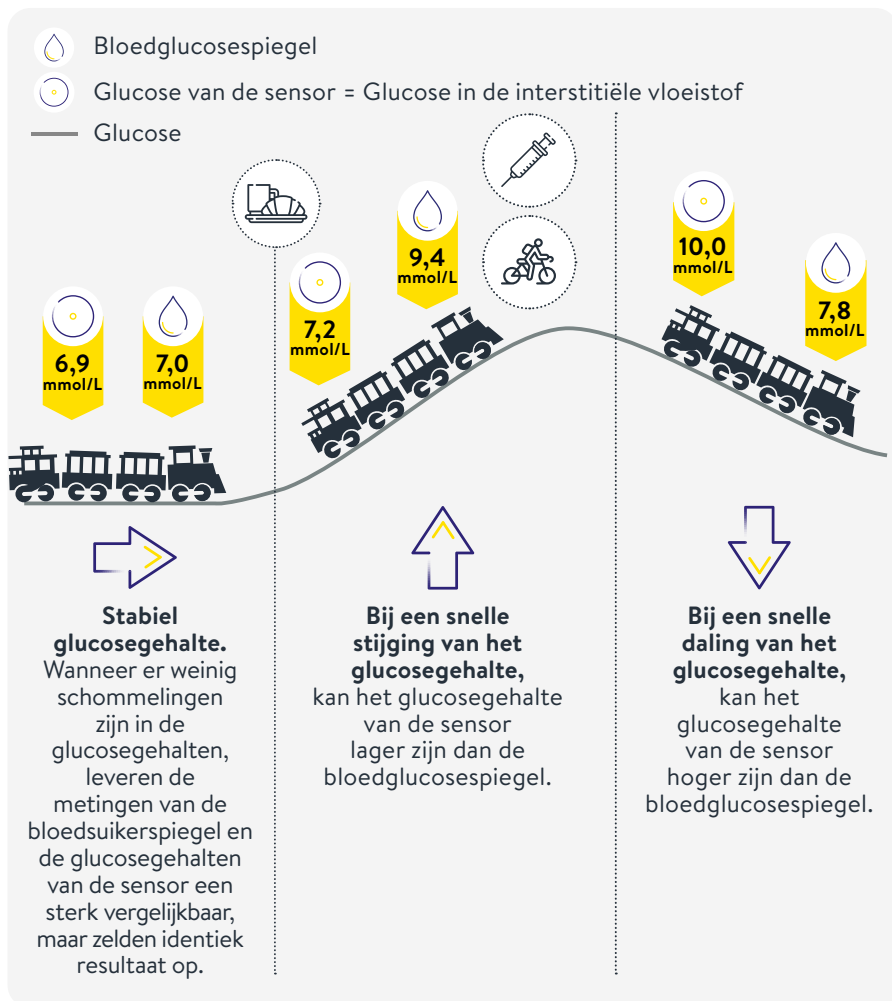

Het glucosegehalte in de interstitiële vloeistof geeft het glucosegehalte in het bloed weer, met een vertraging van gemiddeld 2,1 minuten*



En stijging of daling van de glucose is dus altijd eerst zichtbaar in het bloed, want deze loopt altijd voor op het glucosegehalte in het interstitiële vloeistof.

Er is een groter verschil in de metingen, bijvoorbeeld na het eten of na een toediening van snelwerkende insuline.

Bekijk videos met uitleg op
www.FreeStyleLibre.com


Gebruik de FreeStyle Libre 3 Plus sensor

Met de Libre app^{1,9} analyseer je de volgende informatie in één oogopslag:

Je huidige glucose-spiegel

De historie van je glucosespiegel gedurende de laatste 3, 6, 12 of 24 uur

Doelbereik
is standaard ingesteld op 3,9-10 mmol/L en kan worden aangepast.

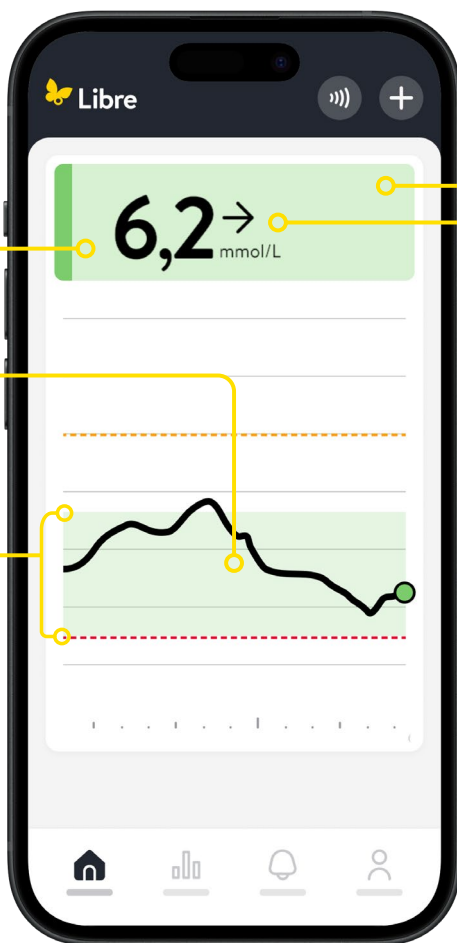

Een kleurcode⁹ die je helpt bij het interpreteren van je glucosepiegel:

GROEN

Je glucosespiegel is **binnen het** ingestelde **doelbereik**.

GEEL

Je glucosespiegel is **buiten het doelbereik**, maar tussen 13,3 mmol/L en 3,9 mmol/L.

ORANJE

Je glucosespiegel is **erg hoog** (> 13,3 mmol/L).

ROOD

Je glucosespiegel is **laag** (< 3,9 mmol/L).

De trendpijl die de evolutie van je glucosewaarde aangeeft

Trendpijl	Betekenis
↑	Je glucose stijgt snel > 0,1 mmol/L per minuut
↗	Je glucose stijgt 0,05 tot 0,1 mmol/L per minuut
→	Je glucose varieert langzaam : < 0,05 mmol/L per minuut
↘	Je glucose daalt 0,05 tot 0,1 mmol/L per minuut
↓	Je glucose daalt snel > 0,1 mmol/L per minuut

Leven met het FreeStyle Libre-systeem

FreeStyle Libre is meer dan alleen niet meer prikken.

Wat zijn de voordelen?



De kleinste, dunste en meest discrete sensor van Abbott.^{10,11}



Praktisch

Je glucosewaarde in één oogopslag.¹²



Waarschuwingen voor hyper en hypo dankzij optionele glucosealarmen.

De alarmen moeten geactiveerd worden om waarschuwingen te kunnen ontvangen.



Real-time glucosemetingen

Elke minuut bijgewerkt.



Eenvoudig en discreet te dragen.

Kleiner dan twee op elkaar gestapelde euromunten van 5 cent.



Waterbestendig⁷

Gedurende 30 minuten en tot een diepte van één meter.



Klinisch bewezen

om de HbA1c te verlagen¹³, de tijd binnen het doelbereik te verlengen¹⁴ en het aantal hypoglycemieën te verminderen^{14,15}, wat kan leiden tot minder medische complicaties.

Draag zorg voor je sensor

Pas op met elementen waardoor de sensor zou kunnen losraken:



Draag gepaste kleding

Draag losse en lichte kleding. Pas op dat je je kleding niet aan de sensor blijft haken wanneer je jezelf aankleedt of uitkleedt.



Droog zachtjes

Vermijd na een douche- of zwemsessie⁷ voorzichtig het vasthaken van je sensor wanneer je jezelf afdroogt.



Wees voorzichtig

Pas op dat je je sensor niet aan alledaagse voorwerpen vasthangt zoals deurkozijnen, autodeuren, veiligheidsgordels, schouderbanden, handtasriemen.

Gebruiksvoorzorgen¹⁶



Reizen

Plant je een vliegreis? Download dan een medische verklaring van [FreeStyleLibre.nl](https://www.freesstylelibre.nl) en laat dit door je arts invullen voordat je vertrekt.



Niet aanraken

Probeer niet aan de sensor te trekken, hem niet aan te raken of ermee te spelen terwijl je hem draagt.



Minimaliseer het risico op vastlopen

Plaats een pleister over de sensor om deze op zijn plaats te houden tijdens contactsporten. Als je sensor loskomt door zweet, gebruik dan een huidlijm.



Temperatuur

De FreeStyle Libre 3 Plus-sensor moet bij een temperatuur tussen 10°C en 45°C worden gebruikt. Als de sensor te warm of te koud is, krijg je de vraag om je glucose enkele minuten later opnieuw te controleren.

Grafieken in de app

1. Tijd binnen bereik

Tijd binnen bereik biedt een grafiek met het percentage van de tijd dat je sensorglucosemetingen boven, onder of binnen bepaalde glucose-bereikwaarden vielen. De aangepaste grafiek is gebaseerd op je glucosedoelbereik. De standaard-grafiek is gebaseerd op een doelbereik van 3,9 tot 10 mmol/L.


2. Gemiddelde glucose

Gemiddelde glucose biedt informatie over het gemiddelde van je sensorglucosemetingen. Het algehele gemiddelde over

de geselecteerde periode wordt vermeld boven de grafiek. Ook het gemiddelde voor verschillende dagdelen wordt weergegeven. Metingen boven of onder je glucosedoelbereik zijn geel, oranje of rood. Metingen binnen het bereik zijn groen.

3. Hypo's

Hypo's biedt informatie over het aantal hypo's dat door je sensor is gemeten. Een hypo wordt vastgelegd wanneer je sensorglucosemeting langer dan 15 minuten lager is dan 3,9 mmol/L. Het totale

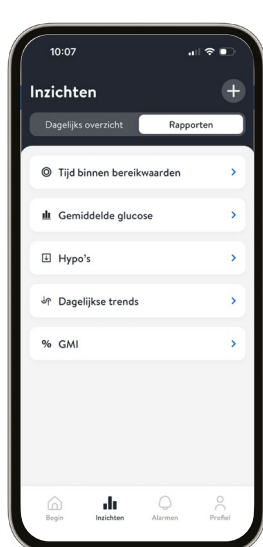

aantal hypo's wordt boven de grafiek weergegeven. In het staafdiagram worden de hypo's in verschillende dagdelen weergegeven.

4. Dagelijkse trends

In de grafiek Dagelijkse trends zie je de trend en de variabiliteit van de glucosemetingen van je sensor gedurende een typische dag.

Zo lees je de grafiek:

De dikke lijn geeft de mediaan (het middelpunt) van je glucosemetingen aan. Het gearceerde gebied dat het dichtst bij de lijn ligt, geeft




het percentielbereik 25-75 van je metingen aan.

Het gearceerde gebied dat het verst van de lijn ligt, geeft het percentielbereik 5-95 van je metingen aan.

5. Glucose Management Indicator

De Glucose Management Indicator gebruikt de gemiddelde glucosewaarden van de sensor. GMI kan worden gebruikt als indicator voor hoe goed je glucoseniveaus onder controle zijn gehouden.

Voor deze inzichten zijn ten minste 5 dagen aan glucosegegevens nodig.

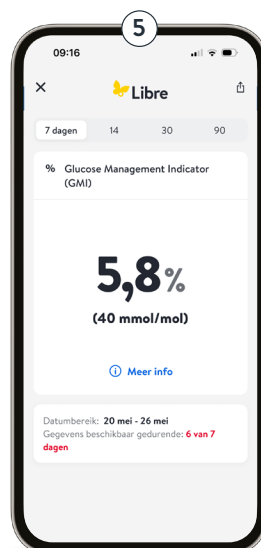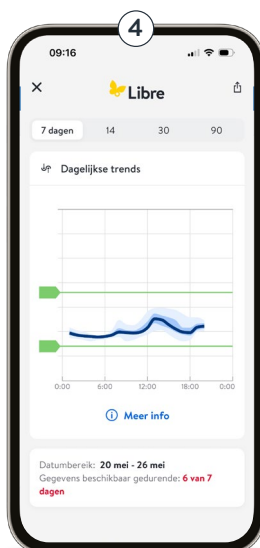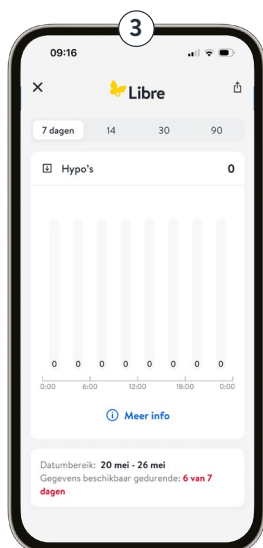

Je kunt heel eenvoudig optionele glucose-alarmen instellen

Met de optionele alarmen kun je zelf bepalen waarvoor en wanneer je wilt worden gewaarschuwd. Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten meldingen en bluetooth zijn ingeschakeld op je smartphone. Bovendien moet de smartphone zich binnen 6 meter van de sensor bevinden (zonder obstakels ertussen).



1 Tik op **Alarmen** in de navigatiebalk onderin het scherm.

2 **Selecteer het alarm** dat je wilt instellen: **Laag (alarm bij lage glucosewaarden)**, **Hoog (alarm bij hoge waarden)** of **Signaalverlies (alarm bij signaalverlies)**.

Tik hier om het alarm aan te zetten.

Tik hier om in te stellen bij welke glucosewaarde **het alarm wordt gegeven**.

Tik hier om het alarmgeluid aan te passen.

Selecteer Niet storen negeren als je ook een alarm wilt krijgen als je smartphone **op stil is gezet** of als de functie Niet Storen is ingeschakeld.



De alarminstellingen volgen de instellingen voor geluiden en trillingen van je telefoon. Zet het geluid hard genoeg om te voorkomen dat je een alarm mist.

Er gaat een alarm af zodra de glucosewaarde onder of boven de ingestelde limiet komt.



Alarm voor lage glucose
kan worden ingesteld
tussen 3,3 en 5,6 mmol/L




Alarm voor hoge glucose
kan worden ingesteld tussen
6,7 en 22,2 mmol/L



Alarm voor signaalverlies
gaat af als je telefoon
langer dan 20 minuten
niet met je sensor heeft
gecommuniceerd

Glucosewaarde

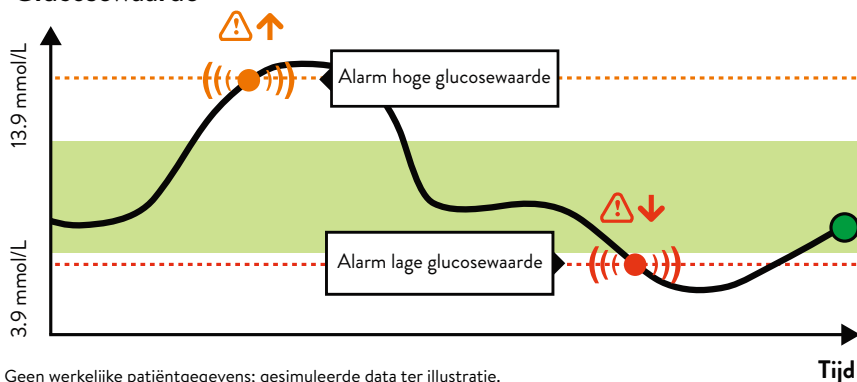

Geen werkelijke patiëntgegevens; gesimuleerde data ter illustratie.



De limieten voor de glucose-alarmen zijn iets anders dan die van je glucosedoelbereik. Bespreek met je behandelaar welke glucose-alarmwaarden voor jou geschikt zijn.

Mijn aanbevolen waarden voor de glucose-alarmen:

Alarmwaarde voor hoge glucose:

Alarmwaarde voor lage glucose:

Glucosewaarden, bij de hand^{4,5}

**De Libre-app voor Apple watch⁴ is nu beschikbaar.
Installeer 'm vandaag nog.**



Makkelijk is nog makkelijker geworden⁴, met de Libre-app voor Apple watch⁵.



Makkelijkere glucosecontrole? Check.

Nu kun je met één handbeweging je glucosewaarden, trends en meldingen zien – zonder op je telefoon te kijken.^{4,5}



Alarmen, ook zonder storen.

Met één tik schakel je alarmen uit op zowel je horloge⁹ als op je telefoon,¹ zodat je ongestoord en gefocust kunt blijven.



Jouw waarden op jouw manier.

Met een verscheidenheid aan displaystijlen kun je kiezen wat het beste bij je past.^{9,17} Aan sommige wijzerplaten van je Apple Watch kun je speciale onderdelen – complicaties genoemd – toevoegen, zodat je direct bepaalde informatie kunt bekijken.




De Libre App voor Watch complicatie laat 3 dingen zien: je huidige glucosewaarde, een trendpijl en hoe recent deze data is. Let op: batterijbespaarstand kan het verversen van data beïnvloeden.

Je gegevens delen met verzorgers

LibreLinkUp¹⁸ is een mobiele applicatie waarmee ouders en andere verzorgers de glucosewaarden van een FreeStyle Libre sensor gebruiker kunnen volgen.

Ga naar Profiel en tik op Verbonden apps. Tik op Connectie toevoegen in de tegel met LibreLinkUp.


Je glucosegegevens delen

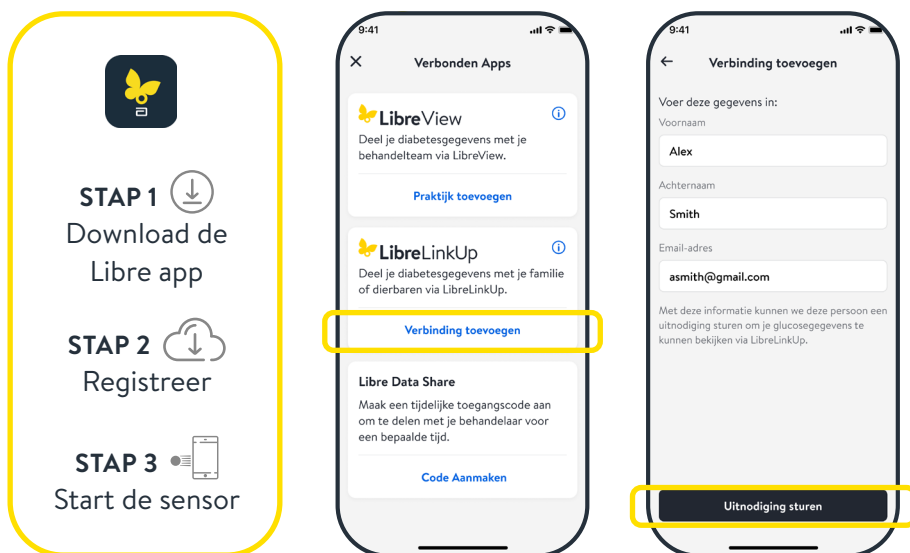

De naaste of de verzorger ontvangt continu de glucoseresultaten van de FreeStyle Libre 3 Plus-sensor.



Deel je glucosewaarden met maximaal 20 personen.

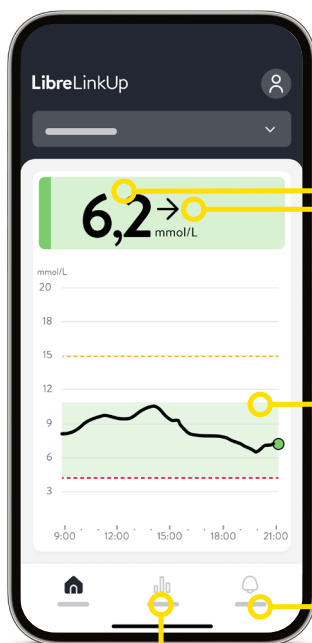

Huidige glucosewaarde

De gekleurde band geeft aan of de glucosewaarde hoog, laag, binnen of buiten het doelbereik is.

Een trendpijl¹⁹

Geeft de richting (stijgend, dalend of stabiel) en de intensiteit van de evolutie van de glucosewaarde aan.

Grafiek met de glucosegegevens van de afgelopen periode


Bekijk hoe voeding, lichaamsbeweging en insuline de glucosewaarde beïnvloeden, dag en nacht.

De meldingen activeren²⁰

Je kunt alarmmeldingen bij lage en hoge glucose bij de gebruiker inschakelen.

Logboek

Bekijk de meest recente glucose-resultaten van de gebruiker.

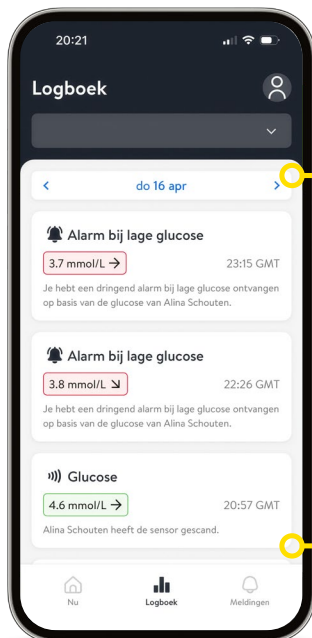

APP STORE



LIBRELINKUP APP



GOOGLE PLAY

Je gegevens delen met je behandelaar



Hoe deel je je gegevens met je behandelaar?


Als je je gegevens met je behandelaar deelt, kan hij of zij je glucosewaarden op afstand bekijken en je helpen bij het managen van je diabetes. Er zijn twee mogelijke manieren als je je gegevens met je behandelaar wilt delen.

SCENARIO 1:

Je behandelaar verstrekt je de ID van zijn of haar LibreView-praktijk²¹


STAP 1

Open de Libre app en tik rechts onderin op **Profiel > Verbonden apps.** Tik op **LibreView > Praktijk toevoegen.**

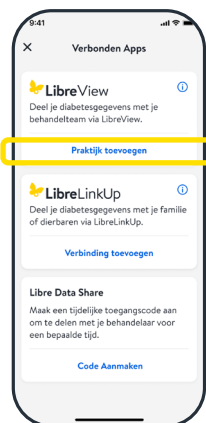

STAP 2

Voer het praktijk-ID in dat je van je behandelaar hebt gekregen en tik op volgende.

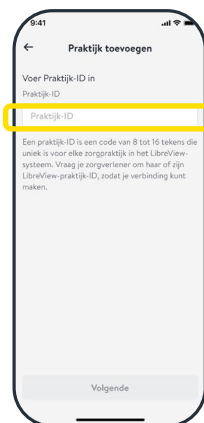

SCENARIO 2:

Je arts nodigt je uit om je aan te sluiten bij zijn of haar LibreView-praktijk


STAP 1

Je ontvangt een uitnodiging van je behandelaar via e-mail.

STAP 2

Klik op de link en volg de stappen.

Automatische Insulinetoedienings-systemen (AID)

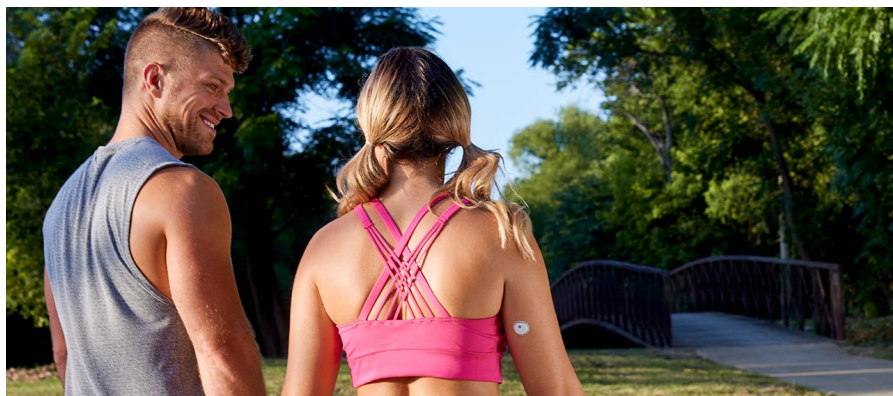

De **FreeStyle Libre 3 Plus-sensor** is geautoriseerd om te werken met verschillende automatische insulinetoedieningssystemen (AID). Op deze pagina hiernaast vindt je een **overzicht** van de bestaande integraties. Voor het gebruik van de FreeStyle Libre 3 Plus-sensor in combinatie met een insulinepomp raadpleeg je de handleiding die bij de pomp wordt geleverd.


myLoop²²

De FreeStyle Libre 3 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het **myLoop** geautomatiseerde insulinetoedienings-systeem (AID).



Omnipod 5®²³

De FreeStyle Libre 3 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het Omnipod 5® systeem voor geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem (AID). De pod wordt getoond zonder de benodigde pleister.

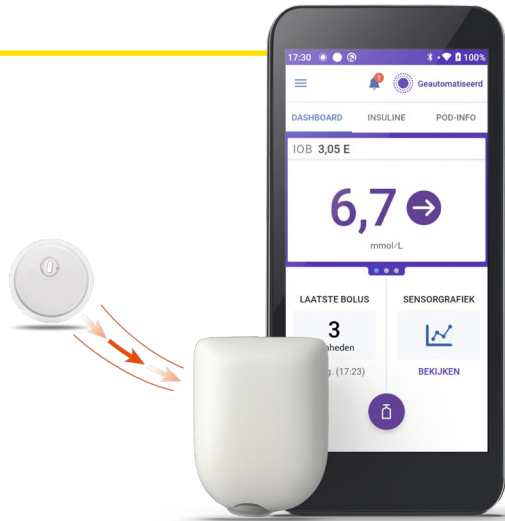

Tandem t:slim X2²⁴

De FreeStyle Libre 3 Plus-sensor is geautoriseerd om te werken met het Tandem t:slim X2 geautomatiseerde insulinetoedieningssysteem (AID).



Ondersteuning en Training

Training

Met deze gratis online training leer je snel het FreeStyle Libre-systeem kennen. De training bestaat uit korte video's en vragen, en duurt ongeveer 15 minuten.

<https://www.freestyle.abbott/nl-nl/training.html>

Nieuwsbrief

Praktische Informatie over producten en apps, vergoeding & zorgverzekering, plus tips over eten, bewegen en leven met diabetes. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

<https://www.freestyle.abbott/nl-nl/nieuwsbrief.html>

Service

Mocht je sensor per ongeluk zijn afgevallen of onverwacht kapot zijn gegaan, dan kun je gebruik maken van de online Sensor Support Service.

<https://www.freestyle.abbott/nl-nl/service.html>

Ondersteuning

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je via de website extra informatie vinden over het plaatsen van een sensor, de mogelijkheden van de apps, en de handleidingen en video's.

<https://www.freestyle.abbott/nl-nl/ondersteuning.html>

Meer informatie op www.FreeStyleLibre.com

**Bel naar dit nummer²⁵ voor
technische ondersteuning**

0800 - 022 88 28

Referenties

1. De Libre app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg www.FreeStyleLibre.nl voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat je de app gebruikt. Het gebruik van de Libre app vereist registratie bij LibreView.
2. Vingerprikken zijn nodig als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met de symptomen of verwachtingen.
3. De kalibratie van het FreeStyle Libre-systeem gebeurt rechtstreeks in de fabriek.
4. De Libre-app voor smartwatches is alleen compatibel met bepaalde apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg onze website voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat je de app gebruikt. Voor het gebruik van de Libre-app is registratie bij LibreView vereist. De Libre-app voor smartwatches mag niet worden gebruikt voor het nemen van behandelbeslissingen. Volg de instructies van de Libre-app op je smartphone.
5. Glucose-informatie en -meldingen worden alleen ontvangen wanneer je smartphone zich binnen het bereik van je sensor en smartwatch bevindt.
6. Meldingen die je op je smartwatch ziet, worden gespiegeld vanuit de Libre-app op je smartphone. Je moet de juiste instellingen op je smartphone inschakelen om meldingen op je smartwatch te ontvangen.
7. De sensor is waterbestendig tot 1 meter diepte. Niet langer dan 30 minuten onderdompelen. Niet gebruiken boven 3048 meter.
8. Rebrin K, Sheppard NF Jr, Steil, GM. Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor offset. J Diabetes Sci Technol. 2010;4(5): 1087-1098.
9. Kleurcodes zijn alleen beschikbaar op de FreeStyle Libre-apps.
10. Onder de door de patiënt zelf aangebrachte sensoren.
11. Gearchiveerde gegevens. Abbott Diabetes Care.
12. Opwarmtijd van 60 minuten vereist.
13. Evans, M. Diabetes Therapy (2020). <https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0>.
14. Bolinder, Jan, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestijn, Jens Kröger, and Raimund Weitgasser. "Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial." The Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254-2263. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31535-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5).
15. Jordan Lang, Sujit Jangam, Timothy Dunn, Gary Hayter. "Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control" [Poster 972]. Diabetes 68, suppl 1 (2019).
16. Raadpleeg je gebruikershandleiding voor de instructies en informatie over het systeem.
17. Yaron, M. Diabetes Care (2019): <https://doi.org/10.2337/dc18-0166>.
18. De LibreLinkUp-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.LibreLinkUp.com voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat je de app gebruikt. Het gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView. De mobiele app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucosemonitor: gebruikers dienen hun primair(e) apparaat(en) en een professionele zorgverlener te raadplegen alvorens medische interpretaties en behandelings-aanpassingen te doen op basis van de informatie die door de app wordt verstrekt.
19. De trendlijn voor de glucosewaarde verschijnt mogelijk niet altijd bij je resultaat.
20. Internet- en Bluetooth-verbinding zijn vereist om automatisch glucosegegevens te uploaden naar LibreView en deze door te sturen naar gebruikers van de LibreLinkUp-app.
21. De LibreView-website is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Raadpleeg www.LibreView.com voor meer informatie. De LibreView-gegevensbeheersoftware is bedoeld voor zowel patiënten als zorgverleners, om mensen met diabetes en hun zorgverleners te helpen bij het beoordelen, analyseren en evalueren van historische glucosegegevens ter ondersteuning van effectief diabetesmanagement. De LibreView-software is niet bedoeld als hulpmiddel voor behandelbeslissingen of ter vervanging van professioneel medisch advies.
22. myLoop en YpsoPump zijn geregistreerde handelsmerken van myLife Diabetes Care AG. CamAPS FX is een geregistreerd handelsmerk van Camdiab Ltd en worden met toestemming gebruikt.
23. Omnipod is een handelsmerk van Insulet Inc en wordt met toestemming gebruikt. De pod wordt getoond zonder benodigde pleister.
24. Tandem, tslim X2 en Control IQ zijn handelsmerken van Tandem Diabetes Care Inc en worden met toestemming gebruikt.
25. Deze nummers zijn gratis. Om vanuit het buitenland te bellen, bel je 0031 888 222 355.

